

FRASTEMA s.r.l. nasce nel settore dell'oftalmologia e si afferma nel campo della costruzione di Riuniti, poltrone e tavoli ad uso oftalmico.

L'introduzione delle più moderne tecnologie ha permesso negli ultimi anni un'incremento notevole della capacità produttiva, con un miglioramento sostanziale anche sotto il profilo della qualità del prodotto finale.

L'ottenimento della certificazione UNI EN ISO 9001 è il risultato finale degli sforzi sostenuti per dare al cliente sempre un miglior servizio.

FRASTEMA s.r.l. born in the ophthalmic field becoming one of the main manufacturers of ophthalmic units, chairs and electrical tables. New technologies have allowed us to increase the number of items we produce with a big improvement of quality.

The certification UNI EN ISO 9001 is the result.



SERVIZIO TECNICO E MAGAZZINO
TECHNICAL DEPARTMENT

Via Bonicalza, 138 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA)
Tel. +39 0331 201009 - Fax +39 0331 281285

UFFICIO VENDITE
SALES DEPARTMENT

Via Bonicalza, 140 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA)
Tel. +39 0331 200923 - Fax +39 0331 282297

<http://www.frastema.com>
e-mail: frastema@tin.it

IL RIUNITO NEW OMEGA E' DISPONIBILE ANCHE CON QUESTI MODELLI DI POLTRONE

NEW OMEGA UNIT IS AVAILABLE ALSO WITH THESE MODELS OF CHAIRS



1 88 • HE
Gemini



2 88 • AD
Optometrist De Luxe



3 88 • DA
Combi Special



4 88 • NE
Executive De Luxe

Foto: Lillo Giovanna
Desig: Arch. Gianluigi Landomi
ART. MASSA



NEW OMEGA



Tecnologia e qualità
per il massimo comfort

Technology and quality
for the best comfort



NEW OMEGA

In uno spazio molto contenuto un nuovo riunito nel quale trovare tutte le comodità. Un cassetto per 232 lenti prova, un ampio cassetto di servizio, una tavola traslante dal nuovo design, una notevole facilità di manutenzione, fanno del New Omega il riunito sul quale fare affidamento per il prossimo futuro.

In a very little space a new unit where is possible to find all these comforts: a drawer for 232 trial lenses, a wide service drawer, a traversing table with a new design, a remarkable facility for the maintenance, make of the New Omega the unit on which trust in the next future.



1
Posizione di reset
Reset position



2
Rotazione tavola 90°
Table rotation 90°



3
Posizione di lavoro
Work position



4
Inclinazione schienale 65°
Back tilting 65°



FUNZIONI QUADRO DI COMANDO - CONTROL PANEL FUNCTION

PROIETTORE

Pulsante comando proiettore
Chart projector on/off push button

ACCENSIONE


Pulsante accensione quadro comando
Control panel power on/off push button

PRESA AUSILIARIA

Interruttore comando presa ausiliaria
Auxiliary out-let On/Off push button

LUCE AMBIENTE

Pulsante comando luce ambiente
Room lamp on/off push button

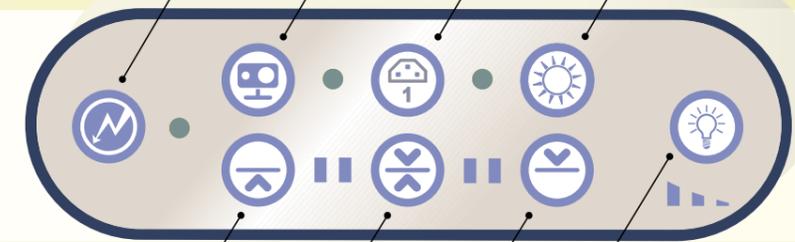

POLTRONA

Pulsanti salita, discesa e reset poltrona
Raising, lowering chair controls and reset



LAMPADA

Pulsante accensione lampada riunito e variatore di luminosità
Over Head lamp on/off push button and dimmer

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

Tensione di ingresso: 220V 50/60 Hz
110V 50/60 Hz
Potenza: 960 VA
Lampada alogena: 150 W
Altezza tavola: 870 mm
Peso: 180 Kg
Larghezza: 1565 mm
Profondità: 1580 mm
Altezza: 2000 mm

Input tension: 220V 50/60 Hz
110V 50/60 Hz
Power: 960 VA
Halogen lamp: 150 W
Table height: 870 mm
Weight: 180 Kg
Width: 1565 mm
Depth: 1580 mm
Height: 2000 mm

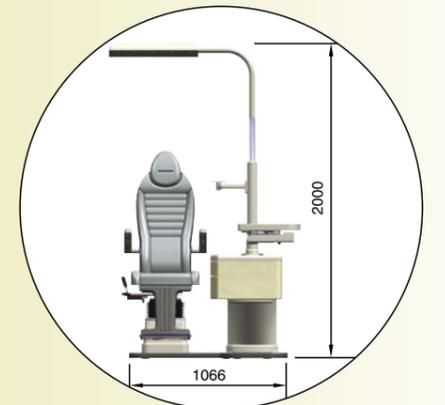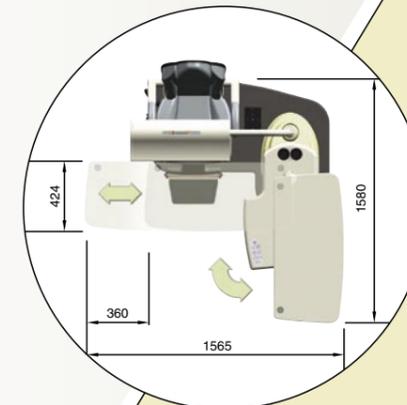


CASSETTO LENTI PROVA

Trial lens drawer

CASSETTO DI SERVIZIO

Service drawers

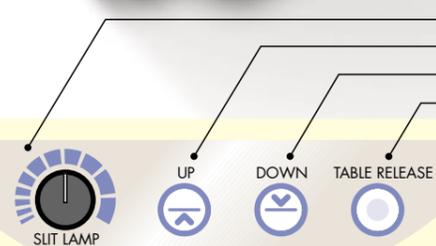

Variatore luminosità lampada a fessura
Pulsante salita poltrona
Pulsante discesa poltrona
Pulsante sblocco tavola

Slit lamp potentiometer
Raising chair control
Lowering chair control
Table release

PANNELLO COMANDO TAVOLA - TABLE CONTROL PANEL