Braccio autobilanciato verticale

motorizzato


Vertical motorized


counterbalanced arm

## EXCLUSIVE 65SB MANUAL

Il riunito Exclusive 65SB è dotato di una tavola a posizionamento strumenti sono regolabili in altezza per 15 cm di corsa e nella posizione desiderata. Il movimento è bloccato tramite un magnete e sbloccato tramite un comando a pedale. Sulla colonna è possibile applicare oltre al proiettore il braccio sia manuale che motorizzata



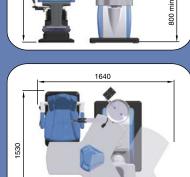

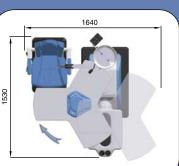

#### EXCLUSIVE 65SB CON STRUMENTI CARATTERISTICHE TECNICHE

Exclusive 65SB with instruments

#### TECHNICAL INFORMATION

Cassetto lenti di prova

Trial lenses drawer

# direttamente dal pannello di comando. **EXCLUSIVE 65SC AUTOMATIC** The EXCLUSIVE 65SC unit is equipped

of three instruments tables with automatic positioning. The adjustment of the table top height is 10cm and the selected instrument is carried automatically in the working position allowing a quick and comfortable execution of the ophthalmic examination. The chair can be equipped even with an horizontal movement controlled directly from the control panel.

**EXCLUSIVE 65SC AUTOMATIC** 

Il riunito EXCLUSIVE 65SC è dotato di tre

automatico. La regolazione dei piani in altezza


automaticamente permettendo una rapida e confortevole esecuzione della visita oftalmica.

La poltrona può essere dotata anche di un movimento orizzontale comandato

tavole portastrumenti a posizionamento

è di 10cm e lo strumento prescelto viene

portato in posizione di lavoro

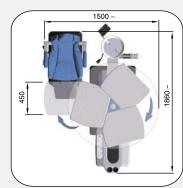

#### **EXCLUSIVE 65SB MANUAL**

The unit Exclusive 65SB is equipped with an instrument table with manual positioning. The adjustment of the instruments table is 15 cm and it is positioned by the operator in the wished position. The movement is locked through a magnet and released through a foot switch. Besides the projector it is possible applyng on the column the horizontal counterbalanced arm or manual or motorized verticale counterbalanced arm.

## PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

Discesa tavole - Tables lowering Salita tavole - Tables raising

Lampada spot - Spot lamp

Presa ausiliare - Auxiliary outlet

Proiettore - Projector

Accensione - Power

Luce ambiente - Room light

Accensione e regolazione lampada riunito - Overhead lamp on/off and dimme

Salita poltrona - Chair raising

Discesa completa poltrona - Complete lowering chair

Discesa poltrona - Chair lowering

## CARATTERISTICHE TECNICHE

1860 mm

1900 mm

1860 mm

1900 mm

220V 50/60 Hz Tensione di ingresso: 110V 50/60 Hz 1060 VA Lampada alogena: 150 W min 800 mm Altezza tavole: max 900 mm 230 Kg Larghezza 1500 mm

#### TECHNICAL INFORMATION

Profondità:

Altezza lampada:

220 V 50/60 Hz Input tension: 110 V 50/60 Hz 1060 VA Halogen lamp: 150 W min 800 mm Tables height: max 900 mm 230 Kg 1500 mm Width:

FRASTEMA

### Salita tavole - Tables raising Posizione di reset - Reset position Discesa tavole - Tables lowering Accensione - Power

Proiettore - Projector

Presa ausiliaria - Auxiliary outlet Lampada spot - Spot lamp

Spostamento indietro poltrona - Chair bacward movement

Spostamento avanti poltrona - Chair forward movement

PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

Discesa poltrona - Chair lowering

Discesa completa poltrona - Complete chair lowering Salita poltrona - Chair raising

Accensione e regolazione lampada riunito - Overhead lamp ON/OFF and dimmer Luce ambiente - Room light control

Pulsanti movimento tavole - Tables movement buttons

Stop di emergenza - Emergency stop

# F R A S T E

Braccio autobilanciato

orizzontale

## EXCLUSIVE 65SB MANUAL

Nel riunito Exclusive 65SB manuale è possibile ritrovare tutte quelle caratteristiche fondamentali per eseguire visite oftalmiche rapide e confortevoli che permettono l'adattamento di ogni paziente alla posizione ideale per il controllo del visus.

In the Exclusive 65SB manual unit it is possible to find all those basic features to execute quick and comfortable ophtalmic examinations allowing every patient to the ideal position to check the visus.

#### EXCLUSIVE 65SC AUTOMATIC



Nel riunito Exclusive 65SC automatico, con la semplice pressione di un comando, è possibile per l'operatore portare lo strumento prescelto di fronte al paziente senza il minimo sforzo consentendo di operare al meglio delle proprie possibilità.

In the Exclusive 65SC automatic unit, the operator can carry the chosen instrument in front of the patient without any effors with the simple pressure of a button allowing to operate in the best possible way.

Il contenitore con il The container with pannello di comando the control panel può ruotare per can rotate to facilitate the use agevolarne l'utilizzo e and it contains a contiene un cassetto predisposto per il set drawer predisposed for the di lenti di prova. Gli trial lenses set. The oftalmoscopio e housing fo ophthalmoscope skiascopio possono essere alimentati a and skiascope can batteria o con be cord or battery collegamento a cavo. | powered.

strumenti

Lampada alogena Halogen lamp

tecnologie ha permesso negli ultimi anni un'incremento notevole della capacità

FRASTEMA s.r.l. nasce nel settore dell'oftalmologia

e si afferma nel campo della costruzione

L'introduzione delle più moderne

di Riuniti, poltrone e tavoli ad uso oftalmico.

produttiva, con un miglioramento sostanziale anche sotto il profilo della qualità del prodotto finale. L'ottenimento della certificazione

UNI EN ISO 9001:2000

sempre un miglior servizio.

é il risultato finale degli sforzi sostenuti per dare al cliente

FRASTEMA s.r.l. born in the ophthalmic field becoming one of the main manufacturers of ophthalmic units, chairs and electrical tables. New technologies have allowed us to increase the number of items we produce with a big improvement of quality. The certification UNI EN ISO 9001:2000 is the result of our efforts.



**POLYVISUS®** 

CISQ

IL RIUNITO EXCLUSIVE 65SB/65SC E' DISPONIBILE ANCHE CON QUESTI MODELLI DI POLTRONE





SERVIZIO TECNICO E MAGAZZINO TECHNICAL DEPARTMENT Via Bonicalza, 138 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) Tel. +39 0331 201009 - Fax +39 0331 281285

UFFICIO VENDITE SALES DEPARTMENT Via Bonicalza, 140 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA)

Tel. +39 0331 200923 - Fax +39 0331 282297

http: www.frastema.com

