

Specyfikacja techniczna

Zakres pomiarowy

Moc sferyczna	-25 D +25 D Krok: 0,01 D 0,06 D 0,12 D 0,25 D
Moc cylindryczna	-9,99 D +9,22 D Krok 0,01 D 0,06 D 0,12 D 0,25 D
Oś	0~180°, Krok: 1°
Pryzma	0Δ 20Δ, Krok:
Kąt pryzmatyczności	0.01Δ 0 180°, Krok: 1°
Addycja	-9,99 D +9,99 D
Soczewki kontaktowe	Krok: 0,01 D 0,06 D 0,12 D 0,25 D
Tryb pomiaru pryzmy	P-B, UD/IO
Pomiar transmisji UV	0 100%, Krok: 1%, długość fali 365 nm (UV-A)
Wyświetlacz Drukarka	7-calowy, kolorowy, 800x480
Interfejs do komunikacji	Drukarka termiczna; szerokość papieru: 57 mm
Wymiary	RS—232, USB
Zasilanie	235 mm (szer.) x 246 mm (gł.) x 487 mm (wys.) / 5,45 kg AC (100 V 240V) +/- 10%, 50/60 Hz



CCQ-800

DIOPTROMIERZ AUTOMATYCZNY

Dane przedstawione w katalogu mają charakter poglądowy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniach bez powiadomienia.



OPTOPOL Technology Sp. z o.o.

ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie
tel.: 32/67 228 00
biuro@optopol.com.pl
www.optopol.com.pl



Precyzyjny pomiar i komfortowa obsługa


Sensor Hartmanna

Sensor Hartmanna ze zwiększoną liczbą punktów pomiarowych poprawia precyzję pomiaru soczewek progresywnych. Dzięki graficznemu interfejsowi użytkownika pomiar jest szybki i intuicyjnie prosty.




Szybkie przetwarzanie danych

CCQ-800 wykorzystuje unikalny, wielowątkowy system przetwarzania danych, który skraca czas wykonania pomiaru do zaledwie 50 ms.

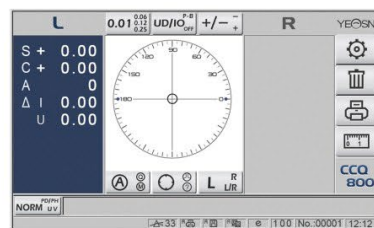

Pomiar transmisji UV

Dioptromierz wykorzystuje falę światła UV (365 nm). Czytelny i prosty w obsłudze ekran pomiaru transmisji UV umożliwia szybkie pozyskanie precyzyjnych wartości.

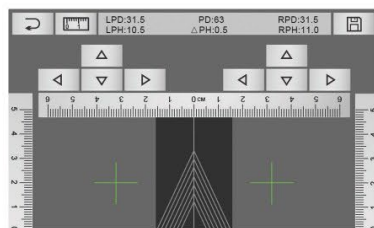

Łatwe pozycjonowanie

Możliwość wprowadzenia wartości pryzmatu z recepty pozwala w łatwy sposób zablokować soczewkę we właściwej pozycji przy pomocy znacznika wyświetlanego na ekranie.



Pomiar soczewek przeciennianych

CCQ-800 umożliwia pomiar soczewek przeciennianych z poziomami transmisji odpowiadającym międzynarodowym standardom.

7-calowy kolorowy wyświetlacz TFT

Wysokiej jakości 7-calowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości 800x480 pikseli i szerokim kącie widzenia zapewnia najwyższy komfort obsługi za pośrednictwem czytelnych ikon.

Automatyczne wykrywanie soczewek

CCQ-800 automatycznie wykrywa między innymi soczewki standardowe i progresywne, po czym uruchamia odpowiedni tryb pomiarowy.

Pomiar przy niskiej wartości astygmatyzmu

Dzięki zaawansowanym algorytmom CCQ-800 umożliwia wykonywanie pomiarów soczewek przy astygmatyzmie na poziomie 0,125 D.



Excellence,
Derived from classics.
Faster, more accurate.